



AESTELIOR
INNOVATIVE ORTHODONTICS



Ортодонтическая
продукция «Эстелиор»

ЭСТЕЛИОР

Объединяя лучших ортодентов

Приглашаем вас познакомиться с ортодонтическими продуктами Ortho Organizers.

Продукция бренда высоко оценивается тысячами врачей и миллионами пациентов по всему миру.

Мы убеждены, что истинно эффективный инструмент в руках врача обуславливает высокий уровень ортодонтии. Уровень, где выигрывают все: доктор и пациент. Вы получаете максимальный контроль над процессом и предсказуемый результат.

Пациент – ускоренное и наиболее комфортное лечение.

Брекеты
Carriere
SLX 3D



Замки
Carriere SLX
3D



Дуги



**Лигатурные
брекеты**



**Sagittal
First**



Инструменты




Брекет-система Carriere SLX 3D и Carriere SLX 3D Clear – точность, эстетика, комфорт

Представляем вашему вниманию Carriere SLX 3D и SLX 3D Clear – беспрецедентно качественные, эстетичные и комфортные брекететы пассивного самолигирования среди всех брекетов на ортодонтическом рынке.

Комфорт пациента


Низкий профиль и гладкость брекета

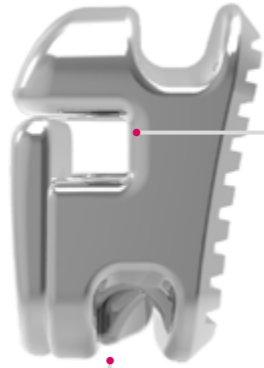

Точность и предсказуемость

Самый точный паз согласно исследованию International Orthodontics*. Для более предсказуемого лечения паз расположен ближе к центру резистентности

Максимальный контроль и отработка характеристик

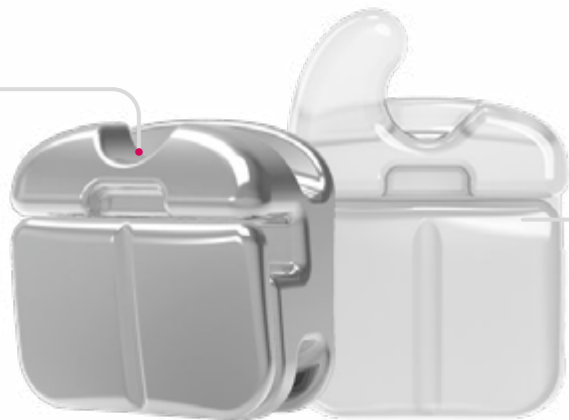

Улучшенная отработка торка, ангуляции и ротации благодаря крышке, полностью перекрывающей паз брекета

Повышение контроля ротации


благодаря индивидуализированному размеру брекетов для каждой группы зубов

Вы можете гарантировать своему пациенту ускоренное и комфортное лечение

* Khaled H. Attia, Sherif A. Elkordy, Mohamed ElKoussy, Amr M. Abouelezz. Are self-ligating brackets' slots dimensions accurate? // International Orthodontics 2018


Надежность

Основание анатомически повторяет контур зуба и имеет абразивное микропротравливание для надежной фиксации

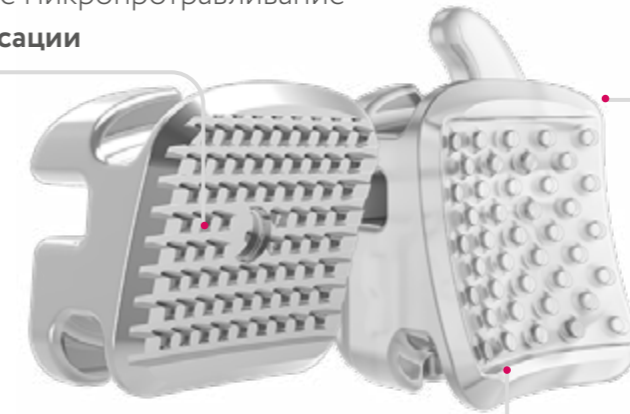

Экономия времени на фиксацию

Вывод излишков адгезива мезиодистально через специальную рамку на основании брекета

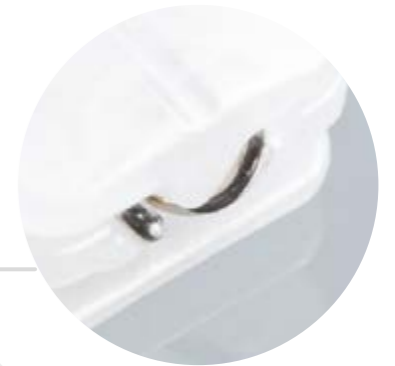

Гарантированно надежное функционирование механизма открывания, закрывания и сохранность крышки на протяжении всего лечения

В конструкции брекета две пружины, что делает механизм значительно надежнее

ТОЧНО. ЭСТЕТИЧНО. КОМФОРТНО.



Посмотрите обучающие вебинары по работе с самыми точными брекетами Carriere SLX 3D. **Перейдите по QR-коду**



Выбор прописи

Брекеты Carriere SLX 3D доступны в двух прописях: Carriere и HLT (high, low torque). Значения по торку, ангуляции и ротации каждой из них представлены в таблицах ниже. Вы можете заказать брекет-системы как полными наборами с прописью Carriere и HLT, так и в созданной вами «авторской» комбинации, сочетающей брекет-системы разных прописей.

Пропись CARRIERE

Верхняя челюсть						SLX 3D	SLX 3D Clear
Расположение	Описание	Зуб	Торк	Ангуляция	Ротация	.022 Правый	.022 Левый
● Центральные резцы	-	U1	+12°	+5°	0°	777-UR1	777-UL1
● Боковые резцы	-	U2	+8°	+8°	0°	777-UR2	777-UL2
● Клыки	крючок	U3	+0°	+9°	0°	777-UR3-НК	777-UL3-НК
● Премоляры	-	U4 & 5	-7°	0°	0°	777-U45	777-U45
● Премоляры	крючок	U4 & 5	-7°	0°	0°	777-UR45-НК	777-UL45-НК

Нижняя челюсть						SLX 3D	SLX 3D Clear
Расположение	Описание	Зуб	Торк	Ангуляция	Ротация	.022 Правый	.022 Левый
● Резцы	-	L1 & 2	-1°	0	0°	777-L12	777-L12
● Клыки	крючок	L3	0°	+5°	0°	777-LR3-НК	777-LL3-НК
● 1-е премоляры	-	L4	-12°	+2°	0°	777-LR4	777-LL4
● 1-е премоляры	крючок	L4	-12°	+2°	0°	777-LR4-НК	777-LL4-НК
● 2-е премоляры	-	L5	-17°	+2°	0°	777-LR5	777-LL5
● 2-е премоляры	крючок	L5	-17°	+2°	0°	777-LR5-НК	777-LL5-НК

Пропись HLT


Верхняя челюсть						SLX 3D	SLX 3D Clear
Расположение	Описание	Зуб	Торк	Ангуляция	Ротация	.022 Правый	.022 Левый
● Центральные резцы	-	U1	+17°	+5°	0°	777-UR1H	777-UL1H
● Боковые резцы	-	U2	+12°	+8°	0°	777-UR2H	777-UL2H
● Клыки	крючок	U3	+7°	+9°	0°	777-UR3H-НК	777-UL3H-НК
● Премоляры	-	U4 & 5	-7°	0°	0°	777-U45	777-U45
● Премоляры	крючок	U4 & 5	-7°	0°	0°	777-UR45-НК	777-UL45-НК

Нижняя челюсть						SLX 3D	SLX 3D Clear
Расположение	Описание	Зуб	Торк	Ангуляция	Ротация	.022 Правый	.022 Левый
● Резцы	-	L1 & 2	-6°	0	0°	777-L12L	777-L12L
● Клыки	крючок	L3	-6°	+5°	0°	777-LR3L-НК	777-LL3L-НК
● 1-е премоляры	-	L4	-12°	+2°	0°	777-LR4	777-LL4
● 1-е премоляры	крючок	L4	-12°	+2°	0°	777-LR4-НК	777-LL4-НК
● 2-е премоляры	-	L5	-17°	+2°	0°	777-LR5	777-LL5
● 2-е премоляры	крючок	L5	-17°	+2°	0°	777-LR5-НК	777-LL5-НК

Клинический случай Лечение на брекет-системе Carriere SLX 3D Clear

Врач: Luis Carriere
Возраст пациента: 20 лет
Срок лечения: 4 месяца

До лечения: открытый прикус, дизокклюзия в переднем отделе, десневая улыбка
После лечения: прикус нейтральный, перекрытие нижних резцов во фронтальном отделе на 1/3 коронок

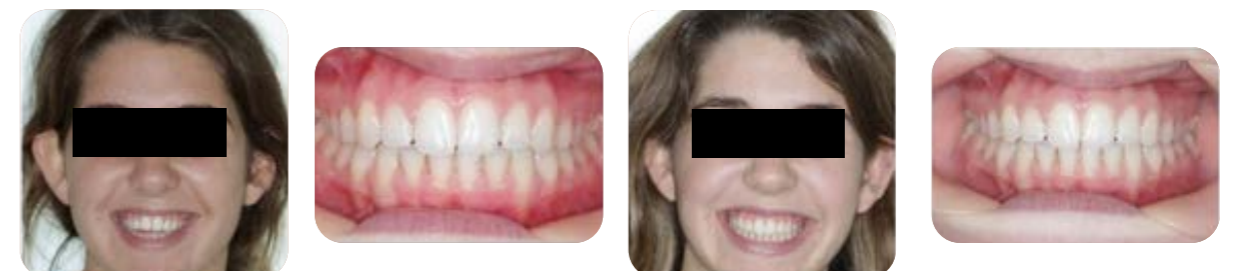


Ортодонтические замки – важный элемент системы

Самолигирующие замки Carriere SLX 3D – фаворит врачей-ортодонтонтов!

Также в линейке брекет-системы Carriere присутствуют керамические замки для первых моляров.

Отличительные особенности самолигирующих замков SLX 3D

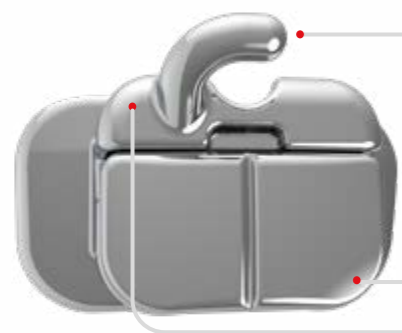

Встроенный обтекаемый крючок для легкого крепления эластиков, стальных лигатур и вспомогательного оборудования

Крышка, открывающаяся по направлению к окклюзионной плоскости, чтобы препятствовать нежелательному открыванию при жевании

Максимальный комфорт пациента благодаря положению крючка и углу наклона

Самолигирующий замок Carriere на 1М .022 паз

Артикул	Зуб	Торк	Ангуляция	Ротация
977-UR6 -HK	16	-14°	0°	+12°DO
977-UL6 -HK	26	-14°	0°	+12°DO
977-LL6 -HK	36	-25°	0°	+2°DO
977-LR6 -HK	46	-25°	0°	+2°DO
Clear				
976-UR6	16	-14°	0°	+12°DO
976-UL6	26	-14°	0°	+12°DO

Щечные трубки

В ассортименте также представлены щечные трубки Maestro и Elite.

Maestro – обтекаемые щечные трубки для вашего удобства и комфорта пациента.



Цветная маркировка для легкой идентификации

Боковые зоны захвата для пинцета облегчают фиксацию щечных трубок

Воронкообразное отверстие с мезиальной стороны упрощает введение дуги

Уникальный отступ от замка для точного и стабильного позиционирования

Щечная трубка Maestro на 1М .022 паз

Артикул	Зуб	Торк	Ангуляция	Ротация
902-301DB	16	-14°	0°	+14°
902-302DB	26	-14°	0°	+14°
902-352DB	36	-25°	0°	+4°
902-351DB	46	-25°	0°	+4°

Щечная трубка Maestro на 2М .022 паз

Артикул	Зуб	Торк	Ангуляция	Ротация
911-313DB	17	-14°	0°	+10°
911-314DB	27	-14°	0°	+10°
911-362DB	37	-25°	0°	+6°
911-361DB	47	-25°	0°	+6°



Конвертируемая щечная трубка на 1М Elite .022 паз

Артикул	Зуб	Торк	Ангуляция	Ротация
901-133	16	-14°	0°	+14°
901-134	26	-14°	0°	+14°
901-122	36	-25°	0°	+4°
901-121	46	-25°	0°	+4°



Щечная трубка мини на 2М Elite .022 паз

Артикул	Зуб	Торк	Ангуляция	Ротация
901-113	17	-14°	0°	+14°
901-114	27	-14°	0°	+14°
901-132	37	-25°	0°	+4°
901-131	47	-25°	0°	+4°




Ортодонтические дуги для любого клинического случая

Результат – краеугольный камень лечения. Наилучший результат возможно получить, подбирая для каждого случая оптимальный протокол и подход к лечению. Для врача важно иметь выбор.

Предлагаем вам самый широкий на ортодонтическом рынке выбор дуг для применения на разных этапах лечения и при различных клинических случаях.

В нашем ассортименте сотни дуг всевозможных физических свойств и характеристик

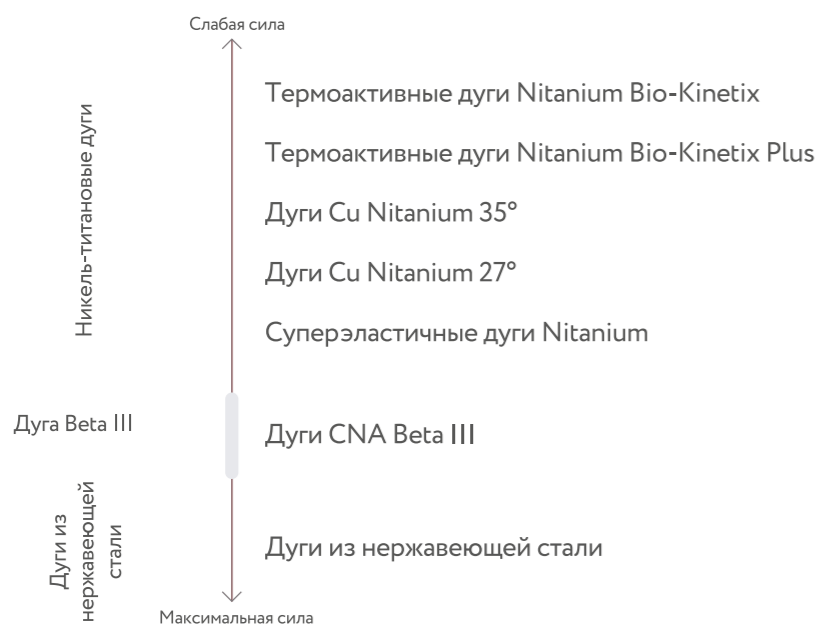

Еще эффективнее с протоколом дуг M-Series*. Три дуги на всё лечение

Эффективность – это отношение результата к понесенным затратам. Мы выбрали для вас продукцию, которая сокращает временные и материальные затраты и повышает эффективность.

Протокол дуг M-Series. Сокращает время на лечение за креслом.



Смотрите полный ассортимент дуг в каталоге «Эстелиор» на странице 44



* Разработан в соответствии с клинической практикой и является частью концепции Sagittal First.

Концепция Sagittal First

Уникальная технология для повышения качества вашей практики!

Вы выигрываете до 6 месяцев в лечении пациента. И на полгода раньше, чем в стандартных схемах, он получает красивую улыбку.

Sagittal First упрощает и ускоряет лечение патологий II и III класса. Согласно концепции, первый этап ортодонтического лечения – достижение соотношения по I классу. Вы достигнете его за 3–6 месяцев.

Ваш помощник – аппарат Carriere Motion 3D. Он применяется в самом начале ортодонтического лечения. И помогает провести самую сложную часть работы – устранить несоответствия зубных рядов в сагиттальном направлении до установки брекетов или элайнеров.

Концепция Sagittal First – прогрессивный подход в развитии ортодонтии, формула вдохновения врача и идеальной улыбки пациента.

Представьте радость пациента, когда вы сообщите о сокращении сроков лечения

Формула абсолютного успеха ортодонта от первой консультации до здоровой улыбки

1	Motion 3D	Достижение соотношения по I классу. Срок: 3–6 месяцев	
2	Carriere SLX 3D	Точные брекеты. Второй этап лечения. Срок: 9–12 месяцев	
3	M-series wires	Три дуги на весь период лечения	

Результат: Здоровая улыбка на всю жизнь!

Новая концепция в ортодонтии доступна для вас уже сегодня.

Как работает концепция Sagittal First? Смотрите в обучающих вебинарах



Клинический случай Лечение на аппарате Carriere Motion 3D

Врач: профессор Сергей Александрович Попов


Срок лечения: общий – 10 месяцев

Возраст пациента: 9 лет

До лечения: дистальный сменный прикус, протрузия фронтального участка на верхней челюсти, сагиттальная щель 5 мм, тремы на верхней челюсти

Этап 1: Motion 3D – 6 месяцев

Этап 2: Эластопозиционер - 4 месяца

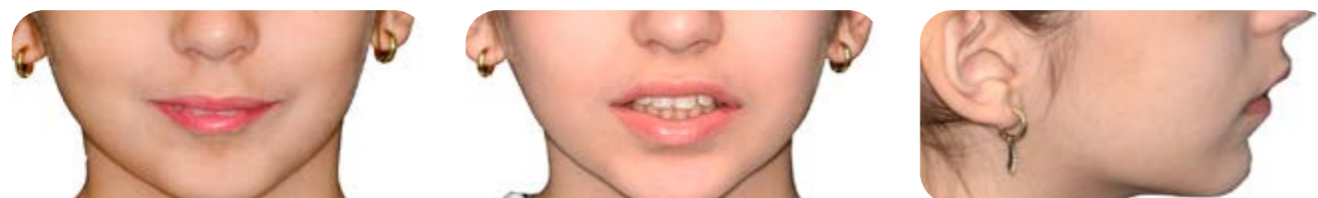

4 месяца лечения с помощью аппарата Carriere Motion 3D




6 месяцев лечения с помощью аппарата Carriere Motion 3D



10 месяцев лечения (Carriere Motion 3D + эластопозиционер)



После лечения: прикус физиологический. Дальнейшее ортодонтическое лечение будет проводиться в соответствии с возрастом пациента.

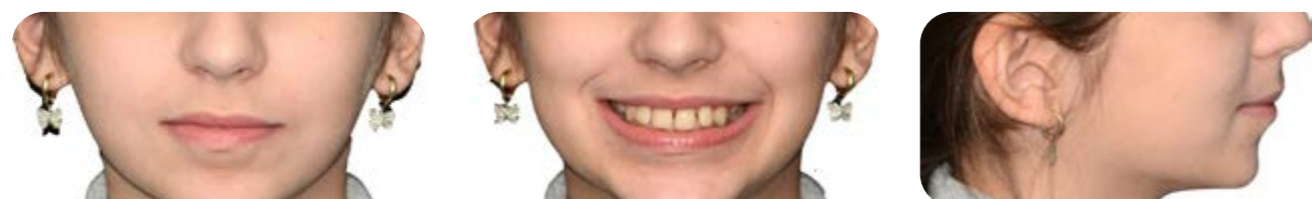

Лигатурные брекеты Aria и Maestro – классика и комфорт в высокотехнологичном исполнении

Классическое лечение пользуется спросом среди пациентов и врачей. Современные технологии сделали его исключительно комфортным.

Предлагаем вам именно такую разработку – лигатурные брекеты Aria и Maestro. Полноценные ортодонтические системы, которые позволяют достичь оптимального клинического результата с комфортом для пациента.

Монолитные брекеты Aria


Преимущество Aria – запатентованная горизонтальная линия в пазах брекета (HSL). HSL создает визуальные подсказки для более точного позиционирования.

Aria изготовлены по передовой технологии MIM, позволяющей создавать точные и монолитные брекеты по выгодной цене.

Антиротация в пазах позволяет более точно размещать брекет



Антиротация в пазах

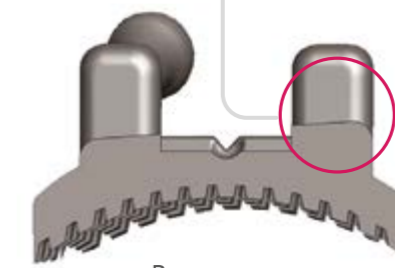

Вид основания брекета в разрезе



Антиротация в основании

Низкопрофильные лигатурные брекеты Maestro

Maestro сочетают в себе точность в работе и гладкость поверхностей. Паз припаян к основанию путем лазерной сварки.

Особенность брекетов Maestro – торк, заложенный в основании. Это позволяет обеспечивать точность позиционирования и качественно обрабатывать торк зубов



Преимущества лигатурных брекетов Aria и Maestro

- Надежность фиксации обеспечена сеткой 80-го калибра в основании брекета
- Легкая установка дополнительных элементов благодаря большому подлигатурному пространству
- Низкий профиль для повышенного комфорта пациента

Aria

Пропись ROTH Верхняя челюсть

Зуб	Торк	Ангуляция	Ротация	.018 Правый	.018 Левый	.022 Правый	.022 Левый
● Центральный резец	+12°	+5°	0°	716-203	716-204	716-303	716-304
● Боковой резец	+8°	+9°	0°	716-221	716-222	716-321	716-322
● Клык с крючком	-2°	+13°	+4°M	716-251НК	716-252НК	716-351НК	716-352НК
● Премоляры с крючком	-7°	0°	+2°D	716-259НК	716-260НК	716-359НК	716-360НК
● Премоляры со смещением к десне основанием с крючком	-7°	0°	+2°D	716-459НК	716-460НК	716-559НК	716-560НК

Пропись MBT Верхняя челюсть

Зуб	Торк	Ангуляция	Ротация	.022 Правый	.022 Левый
● Центральный резец	+17°	+4°	0°	716-305	716-306
● Боковой резец	+10°	+8°	0°	716-323	716-324
● Клык с крючком	-7°	+8°	0°	716-355НК	716-356НК
● Премоляры с крючком	-7°	0°	0°	716-357НК	716-358НК
● Премоляры со смещением к десне основанием с крючком	-7°	0°	0°	716-557НК	716-558НК



Пропись ROTH Нижняя челюсть

Зуб	Торк	Ангуляция	Ротация	.018 Правый	.018 Левый	.022 Правый	.022 Левый
● Центральные и боковые резцы	-1°	0°	0°	716-233	716-233	716-333	716-333
● Клык с крючком	-11°	+7°	+2°M	716-269НК	716-270НК	716-369НК	716-370НК
○ 1-й премоляр с крючком	-17°	0°	+4°D	716-289НК	716-290НК	716-389НК	716-390НК
○ 1-й премоляр со смещением к десне основанием с крючком	-17°	0°	+4°D	716-489НК	716-490НК	716-589НК	716-590НК
● 2-й премоляр с крючком	-22°	0°	+4°D	716-293НК	716-294НК	716-393НК	716-394НК
● 2-й премоляр со смещением к десне основанием с крючком	-22°	0°	+4°D	716-493НК	716-494НК	716-593НК	716-594НК

Пропись MBT Нижняя челюсть

Зуб	Торк	Ангуляция	Ротация	.022 Правый	.022 Левый
● Центральные и боковые резцы	-6°	0°	0°	716-335	716-335
● Клык с крючком	-6°	3°	0°	716-371НК	716-372НК
○ 1-й премоляр с крючком	-12°	2°	0°	716-387НК	716-388НК
○ 1-й премоляр со смещением к десне основанием с крючком	-12°	2°	0°	716-587НК	716-588НК
● 2-й премоляр с крючком	-17°	2°	0°	716-391НК	716-392НК
● 2-й премоляр со смещением к десне основанием с крючком	-17°	2°	0°	716-591НК	716-592НК



Брекеты Aria (пропись Roth) доступны для заказа в наборах:

.018: арт. 716-299Q

.022: арт. 716-399Q

Брекеты Aria (пропись MBT) доступны для заказа в наборе

.022: арт. 716-399MCQ

Maestro

Пропись ROTH Верхняя челюсть

Зуб	Торк	Ангуляция	Ротация	.018 Правый	.018 Левый	.022 Правый	.022 Левый
● Центральный резец	+12°	+5°	0°	711-203	711-204	711-303	711-304
● Боковой резец	+8°	+9°	0°	711-221	711-222	711-321	711-322
● Клык с крючком	-2°	+13°	+4°M	711-251НК	711-252НК	711-351НК	711-352НК
● Премоляры с крючком	-7°	0°	+2°D	711-259НК	711-260НК	711-359НК	711-360НК
● Премоляры со смещением к десне основанием с крючком	-7°	0°	+2°D	-	-	711-579НК	711-580НК

Пропись MBT Верхняя челюсть

Зуб	Торк	Ангуляция	Ротация	.022 Правый	.022 Левый
● Центральный резец	+17°	+4°	0°	711-305	711-306
● Боковой резец	+10°	+8°	0°	711-323	711-324
● Клык с крючком	-7°	+8°	0°	711-355НК	711-356НК
● Премоляры с крючком	-7°	0°	0°	711-357НК	711-358НК
● Премоляры со смещением к десне основанием с крючком	-7°	0°	0°	711-557НК	711-558НК

Пропись ROTH Нижняя челюсть

Зуб	Торк	Ангуляция	Ротация	.018 Правый	.018 Левый	.022 Правый	.022 Левый
● Центральные и боковые резцы	-1°	0°	0°	711-233	711-233	711-333	711-333
● Клык с крючком	-11°	+7°	+2°M	711-269НК	711-270НК	711-369НК	711-370НК
○ 1-й премоляр с крючком	-17°	0°	+4°D	711-289НК	711-290НК	711-389НК	711-390НК
○ 1-й премоляр со смещением к десне основанием с крючком	-17°	0°	+4°D	711-279НК	711-280НК	711-379НК	711-380НК
● 2-й премоляр с крючком	-22°	0°	+4°D	711-293НК	711-294НК	711-393НК	711-394НК
● 2-й премоляр со смещением к десне основанием с крючком	-22°	0°	+4°D	-	-	711-573НК	711-574НК

Пропись MBT Нижняя челюсть

Зуб	Торк	Ангуляция	Ротация	.022 Правый	.022 Левый
● Центральные и боковые резцы	-6°	0°	0°	711-335	711-335
● Клык с крючком	-6°	+3°	0°	711-371НК	711-372НК
○ 1-й премоляр с крючком	-12°	+2°	0°	711-387НК	711-388НК
○ 1-й премоляр со смещением к десне основанием с крючком	-12°	+2°	0°	711-577НК	711-578НК
● 2-й премоляр с крючком	-17°	+2°	0°	711-391НК	711-392НК
○ 2-й премоляр со смещением к десне основанием с крючком	-17°	+2°	0°	711-571НК	711-572НК

Брекеты Maestro (пропись Roth) доступны для заказа в наборах:

.018: арт. 711-299Q

.022: арт. 711-399Q

Брекеты Maestro (пропись MBT) доступны для заказа в наборе

.022: арт. 711-399MCQ

Инструменты

Фиксация, позиционирование, изгибы – ежедневная практика врача-ортодонта, для которой требуются самые качественные инструменты!

Для лучших ортодонтов мы выбрали TRIUMPH и ENDURA PLUS.

Соответствуют
высоким стандартам

При их разработке и изготовлении внимание уделяется каждой детали, что обеспечивает улучшение рабочих характеристик инструмента и его долговечность.



Инструмент EZ-Twist

Мы создаем для вас удобную ортодонтию.

Запатентованный инструмент EZ-Twist сделает комфортной вашу повседневную практику.

Для быстрой и удобной смены дуг просто поверните его!

Новейший инструмент **SLX 3D EZ Twist Opener** не касается стенок паза брекета, что исключает повреждение слайдерной системы. Рекомендован как для эстетических, так и для металлических брекетов.



Carriere SLX 3D EZ Twist Opener

арт. 201-510

Смотрите полный
ассортимент
инструментов
в каталоге «Эстелиор»
на странице 70



Путь в инновационную ортодонтию продолжается здесь



Сайт / aestelior.ru

Официальный сайт
и интернет-магазин



Youtube / aestelior

Записи вебинаров
Обучающие ролики по продукции



Telegram / aestelior

Записи вебинаров и анонсы мероприятий
Научные статьи и клинические случаи
Выгодные предложения



VK / aestelior

Записи вебинаров и анонсы мероприятий
Научные статьи и клинические случаи
Выгодные предложения



Семинары

Образование для ортодонтов
от практикующих опытных специалистов

Сделать выбор в пользу точности

+7 (812) 610-05-67

info@aestelior.ru



ООО «Эстелиор» — дистрибьютор ортодонтической продукции
Ortho Organizers в России

